



B CLASSIC

**Универсальное решение:
эффективность и простота**



Гибкость загрузки

Модели объёмом 17 и 22 л поставляются с пятью лотками и вмещают до трёх кассет. Версия объёмом 28 л поставляется с шестью лотками и вмещает до четырёх кассет. Дополнительный модульный держатель лотков обеспечивает ещё большую гибкость загрузки и расширяет возможности конфигурации.



Дизайн и удобство очистки

Лаконичный и современный дизайн автоклава сочетает эстетику с практичностью. Все поверхности обеспечивают высокий уровень санитарной обработки, а стеклянный сенсорный экран — максимальную гигиеничность и широкие функциональные возможности. Стиль и практичность для современного процесса стерилизации.



Удобный дисплей

Сенсорный экран диагональю 3,2 дюйма обеспечивает эффективное и интуитивно понятное управление всем процессом стерилизации. Наглядная и простая графика облегчает использование различных функций и выполнение каждого этапа.

Создан для универсального применения

Современный дизайн и три варианта объёма обеспечивают максимальную гибкость.

Объём камеры можно подобрать под ваши задачи без изменения внешних габаритов автоклава. Легко очищаемые поверхности и удобный дисплей обеспечивают практичность в повседневной работе. Универсальная, гигиеничная конструкция повышает удобство без ущерба для эффективности и качества стерилизации. Результат — оптимальный баланс функциональности и простоты использования.



Три объёма — одни габариты

Доступны камеры объёмом 17, 22 и 28 л. Три варианта вместимости позволяют выбрать аппарат под конкретные потребности. Одинаковые внешние габариты всех трёх моделей упрощают установку, в том числе встраивание, и позволяют экономить место на рабочих поверхностях.

Удобная прослеживаемость и развитые возможности подключения


Управление автоклавами, отчёты о циклах и удалённая техническая поддержка.

Расширенные возможности контроля отчётности о процессе с автоматической загрузкой программного обеспечения и подключением по Wi-Fi/Ethernet позволяют связать аппарат с облачными платформами для удалённого управления автоклавом. Также предусмотрено подключение внешнего принтера штрихкодов.



Выгрузка отчётов о циклах

По завершении каждого цикла формируется отчёт, который автоматически сохраняется в памяти автоклава. Можно сохранить до 10 000 циклов. Отчёты выгружаются в формате PDF через USB-порт на передней панели аппарата. Входящее в комплект ПО DataSter позволяет автоматически загружать отчёты непосредственно в сетевую папку или папку на компьютере.

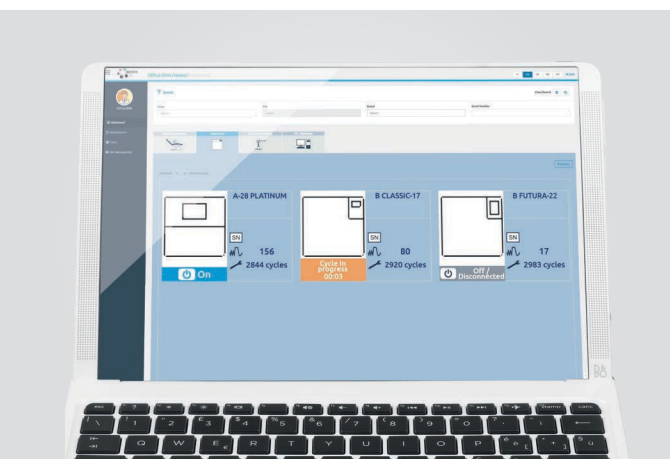

Di.V.A.

Di.V.A. — дополнительная облачная среда для стерилизационного оборудования. Все сохранённые данные доступны операторам и позволяют:

- просматривать отчёты о завершённых циклах;
- проверять эффективность и состояние аппарата;
- открывать видеoinструкции и руководства;
- просматривать статистику использования.



EasyCheck

Дополнительная облачная платформа EasyCheck обеспечивает удалённую техническую поддержку и существенно сокращает время сервисного обслуживания. Обновления ПО, контроль межсервисных интервалов, удалённая проверка компонентов и датчиков и другие функции обеспечивают эффективность, надёжность и длительную работоспособность автоклава.



ПО для прослеживаемости

MyTrace — дополнительное ПО для автоклавов, устанавливаемое на компьютер клиники. С помощью штрихкода оно связывает наборы простерилизованных инструментов с пациентами. Архив циклов, список пациентов и привязка стерильных инструментов делают MyTrace незаменимым средством полной прослеживаемости и правовой защиты стоматолога.



Принтер

Дополнительно предлагается внешний принтер для печати отчётов или этикеток со штрихкодами. Этот полезный инструмент завершает процесс прослеживаемости и позволяет связать цикл стерилизации со стерильными инструментами.

Оптимизированный рабочий процесс

Удобное управление аппаратом обеспечивает максимальную производительность, эффективность и практичность.

Настройка циклов, управление доступом пользователей и напоминания обеспечивают полный контроль, повышая эффективность и безопасность.

Простота использования и точная настройка обеспечивают надёжную, полноценную работу с полным контролем процесса стерилизации.



Идентификация пользователя

После включения функции идентификации операторов доступ к аппарату получают только уполномоченные сотрудники. Ввод PIN-кода позволяет вести историю использования и точно контролировать процесс. Это обеспечивает безопасное и контролируемое управление аппаратом, создавая надёжную среду для стерилизации.



Напоминания о тестах и обслуживании

Можно включить напоминания о проведении плановых тестов. Они уведомляют оператора о необходимости периодических проверок стерилизатора: вакуумного теста и тестов Helix / Боуи—Дика. Одновременно отображаются предупреждения о сроках технического обслуживания для поддержания максимальной эффективности и работоспособности аппарата.



Пользовательский цикл

Настраиваемый цикл позволяет оператору безопасно адаптировать стерилизацию к потребностям стоматологической клиники. Выбирая параметры из заданного диапазона значений, соответствующих нормативным требованиям, можно оптимизировать процесс. Это обеспечивает гибкость и точность, необходимые для различных условий работы.



Отложенный запуск и дополнительная сушка

Отложенный запуск позволяет программировать время начала цикла для рационального использования аппарата. Функция дополнительной сушки позволяет задавать индивидуальное время сушки для загрузок, требующих более длительного высушивания.

Автоматизированный протокол стерилизации

Решение Мосом для правильного выполнения протоколов стерилизации и защиты пациентов и медицинских работников.



Сбор



1

СБОР

Протокол стерилизации начинается со сбора инструментов и материалов.



Дезинфекция



Мойка



Ополаскивание



Сушка



2

TETHYS H10

Создан, чтобы дать вам лучшее: высокую производительность при простом и быстром рабочем процессе. Инновационная моечно-дезинфицирующая машина с термической дезинфекцией заменяет многочисленные ручные операции перед стерилизацией и снижает рабочую нагрузку. Дополнительный модуль HMD позволяет Tethys H10 выполнять обработку вращающихся инструментов для повторного использования, обеспечивая непревзойдённые рабочие характеристики.

3

4

5



Проверка и обслуживание



6

THALYA - THALYA PLUS

Thalya помогает стоматологу эффективно обслуживать вращающиеся инструменты. Простой и удобный аппарат обеспечивает полноценную смазку и продувку турбинных и других стоматологических наконечников. Версия Thalya Plus дополнительно выполняет очистку, дезинфекцию и сушку инструментов в рамках одного цикла.



Упаковка



7

MILLSEAL

Линейка термосварочных аппаратов отвечает самым разным потребностям. Версия EVO автоматически изготавливает пакеты. Версия Rolling, также доступная с принтером, сочетает высокую скорость запечатывания с возможностью выбора размеров упаковки. Версия Manual отличается простотой использования и высокой надёжностью.



Стерилизация



8

АВТОКЛАВЫ

Автоклавы Мосом с камерами объёмом 17, 22 и 28 л упрощают работу оператора, оптимизируя затраты времени и средств. Высокое качество и расширенные функции обеспечивают безопасность, надёжность и удобство использования.



Прослеживаемость



9

MYTRACE

MyTrace — ПО для прослеживаемости, которое позволяет связать набор простерилизованных стоматологических инструментов с пациентом посредством считывания штрихкода или QR-кода.



Хранение



10

ХРАНЕНИЕ

Правильное хранение обеспечивает длительное сохранение стерильности инструментов.

<https://mirdental.ru/>



Технические характеристики	B Classic 17	B Classic 22	B Classic 28
Электропитание	220/240 В, 50 Гц 220/230 В, 60 Гц		
Номинальная мощность	2300 Вт		
Внешние габариты (Д × В × Г)	500 × 490 × 600 мм		
Размеры камеры (диаметр × глубина)	250 × 350 мм	250 × 450 мм	280 × 450 мм
Общая масса	46 кг	49 кг	52 кг
Объём бака	6 л		
Работа без долива воды	От 9 до 13 циклов	От 8 до 12 циклов	От 7 до 11 циклов

Циклы стерилизации, 220/240 В					
ЦИКЛ	Тип цикла	Время стерилизации	B Classic 17	B Classic 22	B Classic 28
		(мин)	Длительность цикла, включая стерилизацию и сушку (мин)*		
134 °C — универсальный	B	4	42	46	56
121 °C — универсальный	B	20	58	63	69
134 °C — быстрый	S	4	22	25	28
134 °C — цельные инструменты в упаковке	S	4	34	39	45
134 °C — прионный	B	18	56	60	70
Xxx °C — пользовательский	S	Пользователь может задать температуру 134 °C / 121 °C, время стерилизации от 4 мин (134 °C) или от 20 мин (121 °C), а также время сушки от 5 до 30 мин.			
Вакуумный тест		ТЕСТ	18	18	19
Тест Helix / Боуи—Дика		ТЕСТ	20	24	28
Вакуумный тест + Helix / Боуи—Дика (последовательное выполнение)		ТЕСТ	42	46	51

* Сушка зависит от модели аппарата и объёма камеры.

Примечание: время предварительного нагрева (1–20 мин) не учтено.

Примечание: время указано для средней загрузки.

Примечание: время может меняться в зависимости от загрузки и электропитания.

Принадлежности

Полный набор принадлежностей для расширения возможностей B Classic.

- 1

Внешний принтер
Подключается к стерилизаторам B Classic и позволяет печатать данные о циклах на термобумаге или этикетках со штрихкодами.

4

Комплект EV aux
Комплект позволяет подключить стерилизатор к системам деминерализации воды в клинике, чтобы аппарат забирал воду только по мере необходимости.

7

Pure 100
Система с двумя ионообменными смолами удаляет ионы, загрязняющие водопроводную воду, и обеспечивает получение высококачественной деминерализованной воды. Устройство полностью управляется стерилизатором.
- 2

Комплект фронтального заполнения
Комплект позволяет заполнять стерилизатор водой спереди через быстросъёмное соединение.

5

Модульный держатель лотков
Модульная система размещения загрузки. Поставляется с тремя парами направляющих для лотков, позволяет полностью использовать диаметр камеры и размещать даже самые объёмные загрузки.

8

Pure 500
Деминерализатор использует обратный осмос для удаления растворённых в воде органических и неорганических веществ и получения воды, подходящей для стерилизации. Устройство полностью управляется стерилизатором.
- 3

Комплект автоматического заполнения
Внешний насос с питанием от стерилизатора позволяет забирать деминерализованную воду из внешней ёмкости.


6

Сканер штрихкодов
Сканер штрихкодов, совместимый с большинством ПК, завершает процесс прослеживаемости и позволяет связать этикетки со штрихкодами с пациентом.

9

Комплект Twin Pure 500
Комплект позволяет одновременно использовать деминерализатор Pure 500 с двумя автоклавами.



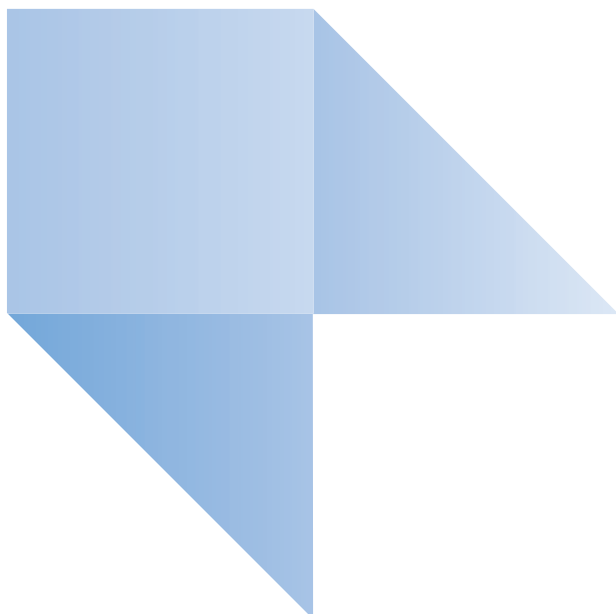

01/2026

MBCLGB1241S00

Cefla s.c. оставляет за собой право изменять изделия, изображённые на фотографиях, без предварительного уведомления.
В соответствии с действующими стандартами за пределами ЕС доступность и технические характеристики некоторых изделий могут различаться. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дистрибьютору.



Подразделение медицинского оборудования
Юридический адрес и административный офис
Штаб-квартира

CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO), Италия
Тел. +39 0542 653111
Факс +39 0542 653344

Производственная площадка

Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO), Италия
Тел. +39 0542 653441
Факс +39 0542 653601
www.mocom.it

